

Monitor Centralny

CNS-9101

Zaprojektowany dla bezpieczeństwa pacjenta



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**



Wszyscy pacjenci
są bezpiecznie monitorowani



Ulepszona opieka nad wieloma pacjentami z monitorem centralnym

Od opieki przy łóżku do całkowitej opieki

Efektywne monitorowanie pacjenta zależy od wczesnego wykrywania zmian jego stanu. Ciągłą czujność personelu nad wszystkimi pacjentami jest ideałem, ale ma swoje ograniczenia, szczególnie podczas nocnej zmiany lub w sytuacji niedoboru personelu. Wtedy istnieje ryzyko przeoczenia zmiany stanu pacjenta.

Monitor centralny w sposób ciągły nadzoruje każdego pacjenta. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz wspiera personel. Jeden monitor centralny CNS-9101 może mieć pieczę nad 48 pacjentami.



Wspomaganie opieki nad pacjentem z monitorem centralnym CNS-9101

Więcej pacjentów - ciągła opieka do 48 pacjentów


CNS-9101 może monitorować 48 pacjentów.

Do 24 pacjentów może być obserwowanych na 24" ekranie. Przy użyciu dwóch monitorów można śledzić 48 pacjentów. Pozwala to na sprawną opiekę nad pacjentem oraz usprawnia przebieg pracy personelu medycznego odpowiedzialnego za wielu pacjentów.

Wszyscy pacjenci są bezpiecznie monitorowani.


Bardziej intuicyjna obsługa - wygodniejsza opieka nad pacjentem

Prosta i szybka obsługa pozwala na skupienie się na pacjencie dla lepszej opieki. Wystarczy kliknąć obszar danych o pacjencie lub parametrze aby wyświetlić więcej informacji lub zmienić ustawienia. Pięć przycisków funkcyjnych u dołu ekranu daje natychmiastowy dostęp do często używanych okien i funkcji.

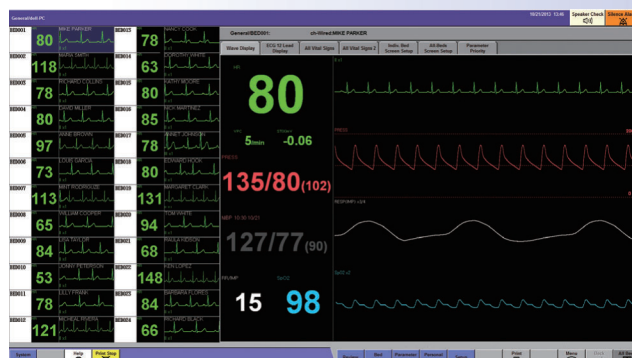

Bardziej elastyczny przegląd - wspiera podejmowanie decyzji

Okna przeglądów są zsynchronizowane czasowo, możliwe jest przełączenie między różnymi widokami tego samego zdarzenia. Możliwe jest przeglądanie zdarzeń arytmii z ostatnich 5 dni jako full disclosure, graf trendu lub dane numeryczne. Zsynchronizowany przegląd pozwala na szybki dostęp do różnorodnych informacji w celu wspierania podejmowania decyzji o opiece nad pacjentem.

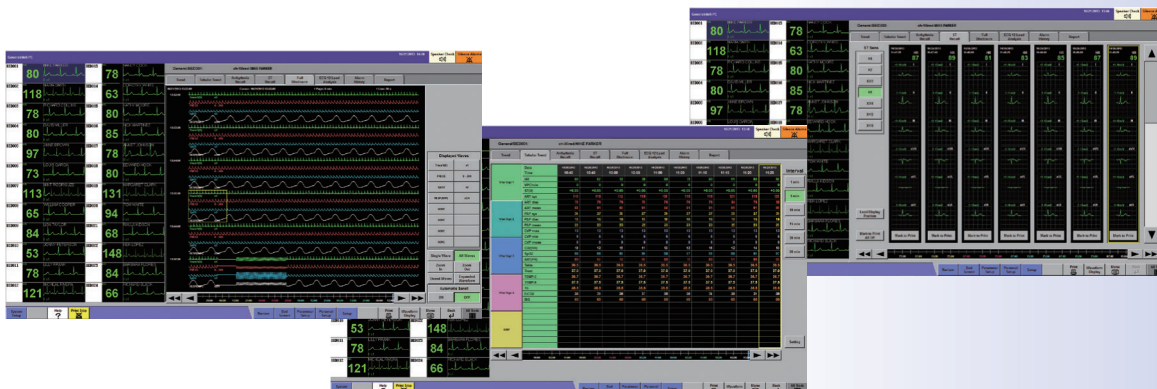

SPECYFIKACJA

Zestawienie systemu (hardware/software)

Hardware (16 pacjentów):

Jednostka centralna* MUC-911R
Moduł LCD VLC-912R
Kabel zasilający, klawiatura, mysz

Software:

QP-914P (Oprogramowanie dla 16 pacjentów)
QP-915P (Zestaw rozszerzenia do 24 pacjentów)
QP-916P (Zestaw rozszerzenia do 32 pacjentów)
QP-917P (Zestaw rozszerzenia do 48 pacjentów)

*Przy zakupie sprzętu oraz lokalnej instalacji oprogramowania należy spełnić następujące wymagania sprzętowe:

Wymagania sprzętowe:

OS:

Windows[®] 7 Professional SP1 (32bit)

Procesor:

3.2GHz lub szybszy procesor dwurdzeniowy

Pamięć:

2 GB lub więcej

Dysk twardy:

200 GB lub więcej, minimum 200 GB miejsca na dysku C

Mysz/Klawiatura:

Standardowa klawiatura 101 USB i mysz kompatybilne


Monitory:

24" LCD, rozdzielczość 1920x1080

Głośnik:

Zewnętrzny lub wewnętrzny głośnik

SIEĆ LIFE SCOPE

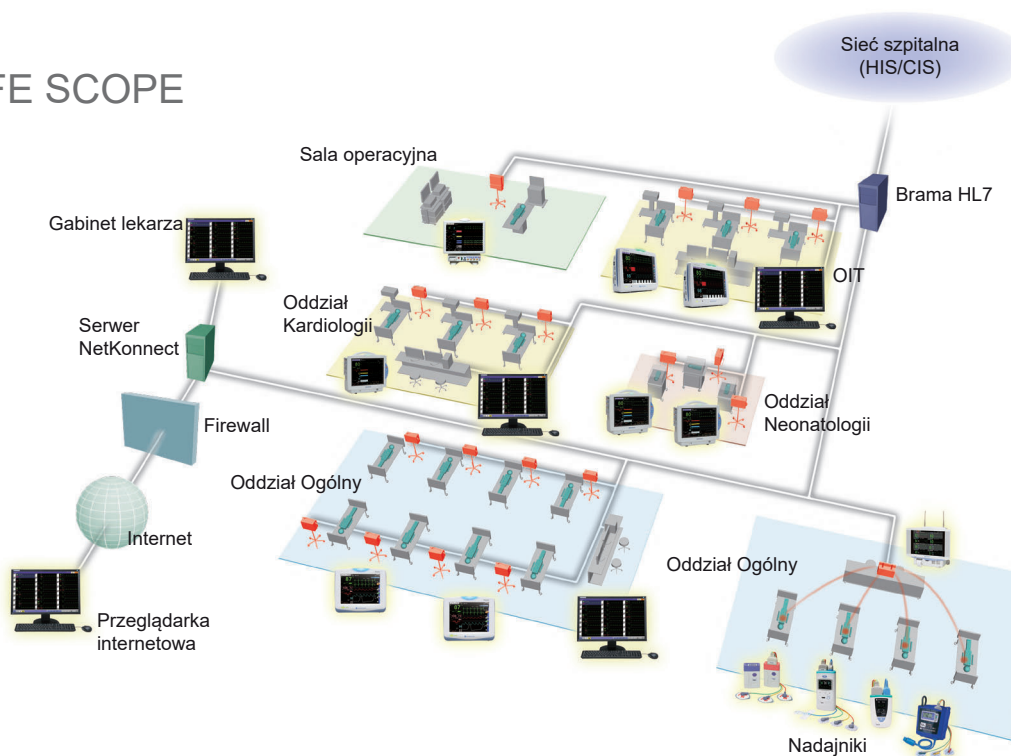

Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation.
Niniejsza publikacja może w każdej chwili zostać zmodyfikowana lub zastąpiona przez firmę Nihon Kohden bez uprzedzenia.

Diagnos Sp. z o.o.
ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa
tel: +48 22 331 05 01...04
fax +48 22 331 05 00
NIP: 951-20-10-594
www.diagnos.pl



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com